


APM 440 XC



Das APM 440 XC Wechseldrucksystem wird zur Prophylaxe und Behandlung von Dekubitus-Patienten bis Stadium IV nach EPUAP eingesetzt.

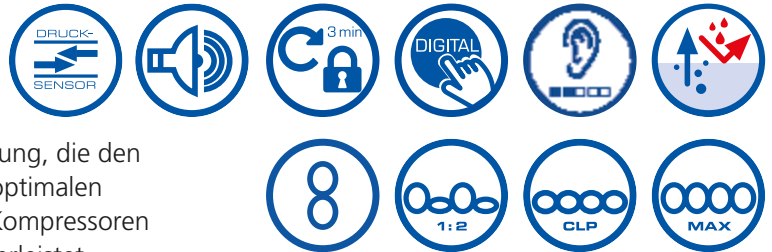

Das Steuergerät verfügt über eine digitale Sensorsteuerung, die den Matratzeninnendruck kontrolliert und hierdurch einen optimalen Auflagedruck ermöglicht. Durch den Einsatz von zwei Kompressoren wird die Sicherheit bei Ausfall eines Kompressors gewährleistet. Die Einstellung erfolgt über ein Touch-Pad-Bedienfeld, das mit verständlichen und gut erkennbaren Piktogrammen ausgestattet ist. Die Bedienung ist schnell und einfach.

- bi-elastischer, atmungsaktiver PU-Bezug, knickfreie Anschlussschläuche, Anschlusskupplung mit Transportsicherung, aussenliegendes CPR-Ventil
- sensorgesteuertes Druckmanagement, Abschaltung zwischen den Zyklen, automatische Tastensperre, Wechseldruck-, Statik (CLP)- und Caremodus, 3 Zeitzyklen 5/10/15 Min. wählbar
- Lagerung bis 230 kg Patientengewicht
- Sequentielle Freilagerung durch abkoppelbare Luftzellen
- Einsetzbar zur Bauchlagerung bei Beatmungspatienten



Technische Daten

Artikel Nr.	991500XC
Steuergerät	Masse: 39 x 21 x 12 cm Gewicht: 5 kg 2 Membrankompressoren, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechsel-druck, Statikbetrieb (CLP), Care-Funktion, 3 Zeitzyklen (5/10/15 Min.), automatische Tastensperre nach 3 min., Backup-Funktion
Matratze	Masse: 200 x 88 x 20 cm Gewicht: ca. 10,5 kg 20 Zellen, 7 Fersenzellen schmal, alle Zellen mit selbstschliessenden Anschlusskupplungen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschluss-schläuche (inkl. Transportsicherung), CPR-Notfallentlüftung
Materialien	Zellen: Nylon mit Polyurethan-Beschichtung Bezug: PU/PES, bi-elastisch, atmungsaktiv, rutschhemmend
Alarm-funktionen	• bei Unterdruck und/oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und optischen Alarm • Netzausfallalarm (akustisch)



Dekubitusgrad: ● I ● II ● III ● IV
Max. Patientengewicht: 230 kg
HMV Nr.: 11.29.08.2004